

客户演示操作手册

智忆评——阿尔茨海默病 认知评估与辅助诊断系统

CogMemory AD - Alzheimer's Cognitive Assessment and
Clinical Decision Support System

面向客户与现场演示人员的中文图文指南。按本手册可完成登录、患者与访视查看、量表初始化、施测草稿、评分复核、认知域结果、临床报告及随访趋势演示。

手册版本

客户演示版 1.0

发布日期

2026-08-04

适用范围

本地 DEMO 环境

开始之前

适用范围与重要提示

本手册展示的是当前演示版本中已经实际接入的产品界面与 workflows。截图全部来自虚构 DEMO 数据，不含真实患者资料。

所有资料均为虚构演示数据。

DEMO-001 至 DEMO-008 仅用于产品演示，不对应任何真实患者或受试者。

推荐账号

doctor1 / demo123

用于演示完整临床链路，包括医生或管理员可执行的报告确认、锁定、来源冻结和归档能力。

操作后恢复

客户自由操作后，可由演示人员重新运行 `seed:demo` 恢复标准演示终态。

不可逆流程的演示前，请先确认是否允许客户试操作。

自动保存不等于提交。

自动保存只保存当前题目的作答草稿；它不会自动提交量表、执行评分、计算认知域或生成临床报告。

报告锁定、来源冻结和归档属于不可逆操作。

客户试操作前应先确认。操作后如需恢复演示环境，请重新运行 DEMO seed。

目录

手册内容

1. 演示账号速查
2. 推荐的 10 至 15 分钟演示路线
3. 登录、轻量工作台与退出
4. 患者列表、患者详情与访视
5. 初始化 MMSE / MoCA
6. 施测、自动保存、立即保存与计时
7. 提交与评分复核
8. 认知域结果
9. 临床报告与不可逆流程
10. 历史评估、报告版本与随访趋势
11. DEMO 场景索引
12. 当前演示边界
13. 演示数据恢复方法

账号速查

全部演示账号

所有演示账号统一密码为 `demo123`。

登录账号	界面显示身份	推荐用途
<code>admin1</code>	演示管理员一	展示管理员登录身份
<code>admin2</code>	演示管理员二	展示管理员登录身份
<code>doctor1</code>	演示医生一	推荐完整演示账号
<code>doctor2</code>	演示医生二	展示医生登录身份
<code>nurse1</code>	演示护士一	展示护士登录身份
<code>nurse2</code>	演示护士二	展示护士登录身份
<code>research1</code>	演示研究员一	展示研究助理登录身份
<code>research2</code>	演示研究员二	展示研究助理登录身份

权限口径：

`doctor1` 是推荐的完整演示账号；其他账号用于展示不同角色登录身份。页面是否允许具体操作，以当前界面和服务端权限结果为准。

现场路线

推荐的 10 至 15 分钟演示路线

01

登录与工作台

使用 doctor1 登录，说明首页是轻量入口。

02

患者档案

展示 8 个虚构演示患者和患者详情入口。

03

访视与量表初始化

打开 DEMO-002，讲解 MMSE / MoCA 初始化区域。

04

施测草稿

打开 DEMO-003 和 DEMO-004，展示 MMSE / MoCA 作答、自动保存和计时状态。

05

评分复核

打开 DEMO-005，说明提交与评分复核彼此独立。

06

认知域与报告草稿

打开 DEMO-006，展示认知域结果和规则化临床报告草稿。

07

最终报告状态

打开 DEMO-007，查看已锁定、来源冻结并归档的报告。

08

历史与趋势

打开 DEMO-008，查看三次访视、历史报告与随访趋势。

步骤 1

登录、轻量工作台与退出

- 1 打开系统登录页，在“账号”中输入 doctor1。
- 2 在“密码”中输入 demo123，点击“登录系统”。
- 3 进入工作台后，确认显示名称、账号和角色摘要。
- 4 点击“进入患者档案”开始临床流程；结束演示时点击右上方“退出登录”。



图 1 | 登录页。输入演示账号和统一密码后进入系统。



图 2 | 登录后的轻量工作台。工作台提供患者档案入口和已接入能力概览，但不是完整医生工作台。

步骤 2

患者列表、患者详情与访视

- 1 从工作台点击“进入患者档案”。
- 2 使用关键词、患者状态或数据来源筛选列表；也可直接在表格中选择 DEMO 场景。
- 3 点击对应患者行的“查看”进入患者详情。
- 4 患者详情中可查看访视列表，并通过“打开访视”进入访视详情。
- 5 DEMO-001 仅有患者档案。可点击“新建访视”，填写访视类型和评估日期后创建第一条访视。

演示建议：

创建访视会修改 DEMO 数据。若只做标准演示，可说明操作路径而不实际提交；如已提交，演示结束后重新运行 seed 恢复。

筛选患者档案

关键词由后端检索患者编号或展示名称；筛选条件会保留在当前地址中。

关键词

患者状态

数据来源

每页条数

输入患者编号或展示名称

全部状态

全部来源

20 条

查询

重置

档案列表

共找到 8 条记录。

患者编号	展示名称	来源	性别	出生日期	教育年限	利手	状态	标签	操作
DEMO-001	演示患者01	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-002	演示患者02	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-003	演示患者03	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-004	演示患者04	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-005	演示患者05	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-006	演示患者06	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-007	演示患者07	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看
DEMO-008	演示患者08	临床	未知	—	—	未知	活跃	DEMO 虚构演示数据	查看

共 8 条, 第 1 / 1 页

上一页

下一页

图 3 | 患者档案列表。8 条记录均为虚构演示数据，可按场景编号快速定位。

客户演示操作手册 · 版本 1.0

9 / 25

步骤 3

初始化 MMSE / MoCA

DEMO-002 已有一条草稿访视，但尚未初始化量表，适合讲解初始化入口。

- 1 在患者列表打开 DEMO-002，再打开其评估访视。
- 2 滚动到“量表初始化”区域，查看 MMSE 和 MoCA 的安全目录摘要。
- 3 在目标量表中选择施测方式。
- 4 点击“初始化量表实例”。初始化成功后，实例会出现在“已初始化量表实例”区域。
- 5 点击“打开量表”进入逐题施测页面。

初始化会写入演示数据。

标准演示可停留在按钮前讲解。如需现场试操作，完成后重新运行 seed 恢复 DEMO-002 的未初始化状态。



图 4 | DEMO-002 量表初始化区域。MMSE 与 MoCA 均显示为“未初始化”。

步骤 4

施测、自动保存、立即保存与计时

DEMO-003: MMSE

已有部分作答，适合演示继续施测、草稿自动保存和逐题计时。

DEMO-004: MoCA

已有部分作答，适合展示另一量表的分组、进度和施测页面。

- 1 打开量表后，先查看页首的未收口作答、未上传证据、未保存人工评分和未保存确认意见。
- 2 在题目卡片中记录原始回答、缺失原因或操作者备注。页面只保存原始作答，不在此处判断正确性或评分。
- 3 停止输入后观察保存状态从“未保存 / 等待自动保存 / 正在保存”变为“已保存”。
- 4 需要立即收口时，点击“保存草稿 / 保存修改”；需要把当前题标记完成时，点击“保存并标记本题完成”。
- 5 对支持计时的题目，可使用“开始计时、暂停计时、继续计时、完成计时”；运行中每 15 秒把实际用时快照进入同一题目保存队列。
- 6 “复位计时”只清除当前题目的计时草稿，不修改作答内容或完成标记。

自动保存只保存作答草稿，不等于提交、评分或生成报告。

它不会正式提交量表、自动计算评分或认知域结果，也不会生成临床报告。

AI4 未返回选项颜色，因此医生转求原始回答，不生成选项，也不对文本解释为行为异常。

本题无法完成 / 缺失记录

开启后会清空本地实际作答、分步实际值和提示后回答；分步 / 提示备注、计时草稿和操作者备注会保留。

缺失原因

操作者备注（量表配置要求记录）

DEMO-01 部分作答，可继续施测

量表配置标识建议记录操作者备注；本阶段不额外强制前端必填。

已保存：2026/08/04 20:06

草稿已由服务器确认保存。

保存修改

保存并保持本题完成

第 2 题 · 多选原始回答转录

未开始

地点定向

题目编码：mmse.orientation.place · CRF：MMSE.1.place

作答类型

是否计入总分

回答来源

认知域编码

多选原始回答转录

服务端标识：计入

医护人员记录

orientation

题目提示

询问城市、区/城区、街道、楼层和当前地点。

图 5 | DEMO-003 MMSE 自动保存。绿色状态区显示草稿已由服务器确认保存，同时保留“保存修改”与“保存并保持本题完成”的显式操作。

客户演示操作手册 · 版本 1.0

13 / 25

工作台患者档案

当前用户：演示医生—退出登录

量表执行

未收口作答：0 题

未上传证据：0 题

未保存人工评分：0 项

未保存确认意见：0 项

返回访视详情

返回患者详情

返回工作台

蒙特利尔认知评估量表 (MoCA)

患者 / 受试者编号：DEMO-004 · 访视：DEMO-004-V01

核心认知量表应由医护或研究人员陪伴或监督完成。当前页支持施测记录、图片与手写等媒体证据、正式提交、评分复核和认知域结果；临床报告工作流位于访视详情。认知域人工确认和 AI 临床解释尚未实现。

访视信息

访视编号
DEMO-004-V01

访视类型 / 状态
基线 进行中

评估时间
2026/07/04 09:00

量表与版本

量表编码 / 版本
MOCA · CRF 1.0 (1.0)

CRF 版本
1.0

来源文档
MMSE+MoCA.pdf

实例与进度

实例编号 / 状态
DEMO-004-V01-MOCA-01 · 第 1 份 进行中

施测方式
医护人员施测

操作者
演示研究员一 (研究助理)

当前真实进度
3 / 16 (19%)

量表提交检查

检查只反映服务器已保存的数据；正式提交不会自动评分或完成访视。

尚未满足提交条件

完整性：未通过

当前可提交：否

检查结果为最新

检查时间：2026/08/04 20:06

预期题目
16

实际题目
16

已完成题目
3

图 6 | DEMO-004 MoCA 施测页。页首显示访视、量表版本、实例状态和当前进度。

题目刺激图片说明：

当前演示版本未在题目界面展示原始刺激图片，本次演示可跳过相关视觉材料。

这与页面已有的拍照上传、平板手写证据能力不是同一项能力；不得把二者混为一谈。

步骤 5

提交与评分复核

DEMO-005 已完成量表提交，并有一份“待复核”的阶段性评分结果。

- 1

在量表页面先查看“量表提交检查”。只有满足提交条件时才能正式提交。
- 2

提交量表后，题目作答进入只读；提交不会自动评分，也不会自动完成访视。
- 3

在“阶段性评分、人工复核与确认”区域查看总分、分组得分和需要复核的项目。
- 4

选择待复核项目，填写人工评分和复核依据，再保存人工评分。
- 5

待复核项处理完成后，按页面提示完成评分确认。评分确认不会自动计算认知域或生成报告。

重新检查提交条件

阶段性评分、人工复核与确认

查询既有结果；人工评分与确认均使用服务端版本进行并发保护。

阶段性计算已完成，存在待人工复核项目

阶段性评分，尚未最终确认

评分结果不得脱离临床背景单独形成诊断结论。
待人工复核项目尚未计入最终得分。

阶段性总分摘要

以下数值直接来自服务端，本页不重新求和或补算比例。

当前已可靠计算：21 分

仍有 0 个计分项目待复核或未评分

服务端分值范围：0 至 30

计分项目总数

11

已可靠计算

11

尚未评分

0

需要复核

1

缺失记录

2

阶段性分组得分

分组汇总由服务端提供，不代表认知域结果。

定向力

分组编码：orientation

阶段性分值：10

服务端分值范围：0 至 10

已计算

2

未评分

0

待复核

1

缺失

0

本组仍有待复核或未评分项目。

即刻回忆

分组编码：immediate_recall

阶段性分值：3

服务端分值范围：0 至 3

已计算

1

未评分

0

待复核

0

缺失

0

本组阶段性项目已全部计算。

图 7 | DEMO-005 评分待复核。当前可靠计算为 21 分，其中 1 项需要人工复核。

客户演示操作手册 · 版本 1.0

15 / 25

步骤 6

认知域结果

DEMO-006 已有确认评分和已计算的认知域结果，可直接查看安全说明、域分数与映射贡献。

- 1 打开 DEMO-006 的 MoCA 量表实例。
- 2 滚动到“认知域计算与安全展示”。
- 3 查看认知域分数、重叠归因说明和题目贡献。
- 4 如场景没有现成结果，必须先确认评分，并在认知域区域明确勾选首次计算确认；页面不会自动计算或重算。

认知域百分比不是疾病概率。

一个题目可以归入多个认知域，各域可能重叠，不能跨域求和解释为量表总分。结果不得脱离量表、临床访谈和其他检查单独形成诊断。

确认时间
2026年7月6日 09:55

确认意见
DEMO-01 虚构演示确认评分

确认记录标识（弱化）
未提供

确认操作者
演示医生一（未知）

本阶段未自动完成访视，也未生成认知域结果或报告；该结果不得脱离临床背景单独形成诊断结论。

► 技术信息 / 计算记录

重新加载评分结果

认知域结果

重新加载认知域结果

认知域计算与安全展示

查询已有结果；无结果时仅在明确确认后首次计算。页面不自动计算，也不支持重算。

认知域结果用于展示量表项目在不同认知维度中的映射情况。
结果不能脱离量表、临床访谈和其他检查单独形成诊断。
映射项目得分比例不是正常率、疾病概率或风险值。

重叠归因说明

- 一个项目可以归入多个认知域。
- 每个认知域获得该项目的完整分值，不进行平均拆分。
- 认知域之间可能存在重叠。
- 各认知域分数不可相加解释为量表总分。

认知域结果已加载。

图 8 | DEMO-006 认知域结果。页面明确展示非诊断边界与重叠归因说明。

客户演示操作手册 · 版本 1.0

17 / 25

步骤 7

临床报告草稿、确认、锁定、来源冻结与归档

临床报告工作流位于访视详情，不在量表实例页面。

DEMO-006：规则化报告草稿

- 1 打开 DEMO-006 的访视详情，滚动到“访视级临床报告”。
- 2 查看报告快照、量表评分、认知域摘要和规则化正文。
- 3 系统草稿由固定服务端规则生成，未使用 AI，也不等同于医生确认。
- 4 医务人员可在允许的状态下补充医生意见和建议，随后提交确认。
- 5 医生或管理员完成确认后，报告进入只读的确认状态。



图 9 | DEMO-006 临床报告草稿。页面明确标注规则化草稿、来源未冻结和报告尚未归档。

DEMO-007：已锁定、来源冻结并归档

- 1 打开 DEMO-007 的访视详情，滚动到临床报告区域。
- 2 查看“已归档报告、已锁定、来源已冻结、报告已归档”状态。
- 3 报告锁定只锁定报告事实；来源冻结用于固定报告所引用的来源链；归档完成最终只读收口。
- 4 这些阶段不会自动串联，每一步均须医生或管理员明确操作，并接受服务端权限和状态校验。

不可逆操作提醒：
报告锁定、来源冻结和归档没有撤销入口。客户试操作前必须确认；试操作后可重新运行 DEMO seed 恢复标准演示环境。

实例编号：DEMO-007-V01-MMSE-01 · 第 1 份

量表版本	施测方式	当前进度	操作者
1.0	医护人员施测	0 / 11	演示医生一
操作者角色	开始时间	完成时间	用时
医生	2026/07/07 09:00	2026/07/07 09:45	45 分
CRF 版本	评分规则版本	字段编码版本	来源文档
1.0	mmse-crf-1.0	mmse-semantic-1.0	MMSE+MoCA.pdf

查看量表

可打开量表进行逐题记录、评分复核与认知域计算；访视级规则化报告草稿请在本页独立报告区域明确选择范围后生成。

访视级临床报告

支持版本化更正、线性来源追溯及当前安全版本的受控报告 workflow；所有写入共享同一写锁与 updatedAt 并发边界。

已归档报告

已锁定

来源已冻结

报告已归档

重新加载最新报告

最新临床报告已加载。

已归档报告

已归档报告

系统规则内容与临床人员补充并存（非 AI）

报告确认流程质量标记已通过

当前内容是临床认知评估报告的结构化信息，不得脱离临床背景单独形成诊断。

pending_confirmation 只能等待 doctor / admin 确认；confirmed、archived、corrected 与 voided 均只读。

系统规则化部分不自动生成诊断阈值、疾病风险等级、医生意见或治疗建议。

认知域之间可能重叠，不能跨域求和解释量表总分。

报告生成时的患者快照

这是报告生成时保存的安全快照，不代表当前实时患者档案。

受试者编号	展示名称	性别	出生日期	受教育年限
DEMO-007	演示患者07	未知	—	—

图 10 | DEMO-007 已归档报告。四个状态标记集中展示报告的最终只读终态。

临床边界：

临床报告需由医务人员审核，不等同于自动诊断；审核时应结合临床访谈、病史和其他检查。当前产品没有正式临床报告 PDF、打印和下载产品功能；本文件只是系统操作手册 PDF。

步骤 8

历史评估、报告版本与随访趋势

DEMO-008 有三次访视、三份历史报告和三个可比较趋势点。

查看评估历史与报告版本

- 1
- 在患者列表打开 DEMO-008，点击“评估历史”。
- 2
- 按访视状态、访视类型、日期或历史量表编码筛选。
- 3
- 在每条访视中查看量表、评分和认知域摘要。
- 4
- 点击“打开访视”，在访视详情的“临床报告版本”区域查看版本列表；历史报告详情为只读页面。

评估历史

活跃

返回患者详情

打开随访趋势

返回患者列表

返回工作台

DEMO-008

演示患者08

评估历史筛选

筛选条件保存在当前 URL；历史量表编码允许输入已退出当前目录的 code。

访视状态

全部状态

访视类型

全部类型

起始日期

yyyy/mm/dd

截止日期

yyyy/mm/dd

历史量表编码

例如 moca

每页条数

20 条

查询

重置

患者评估历史

共 3 条访视记录，保持后端排序。

DEMO-008-V03

已完成

打开访视

随访 · 评估时间 2026/07/15 09:00

开始时间

2026/07/15 09:00

完成时间

2026/07/15 09:45

锁定时间

—

作废时间

—

量表摘要 (1)

mmse / 1.0

已完成

实例编号: DEMO-008-V03-MMSE-01

施测方式

临床人员施测

用时

2,700 秒

开始时间

2026/07/15 09:00

完成时间

2026/07/15 09:45

锁定时间

—

作废时间

—

总分摘要

认知域摘要

图 11 | DEMO-008 评估历史。页面保留后端排序，并展示最近访视的量表与结果摘要。

查看随访趋势

- 1
- 从患者详情或评估历史点击“随访趋势”。
- 2
- 选择 MMSE，设置日期范围和最大访视点数，点击“查询趋势”。
- 3
- 查看三次相邻访视的得分比例曲线和下方明细表。
- 4
- 可切换认知域指标；只有服务端判定可比较的相邻点才连线，缺失点不会显示为 0。

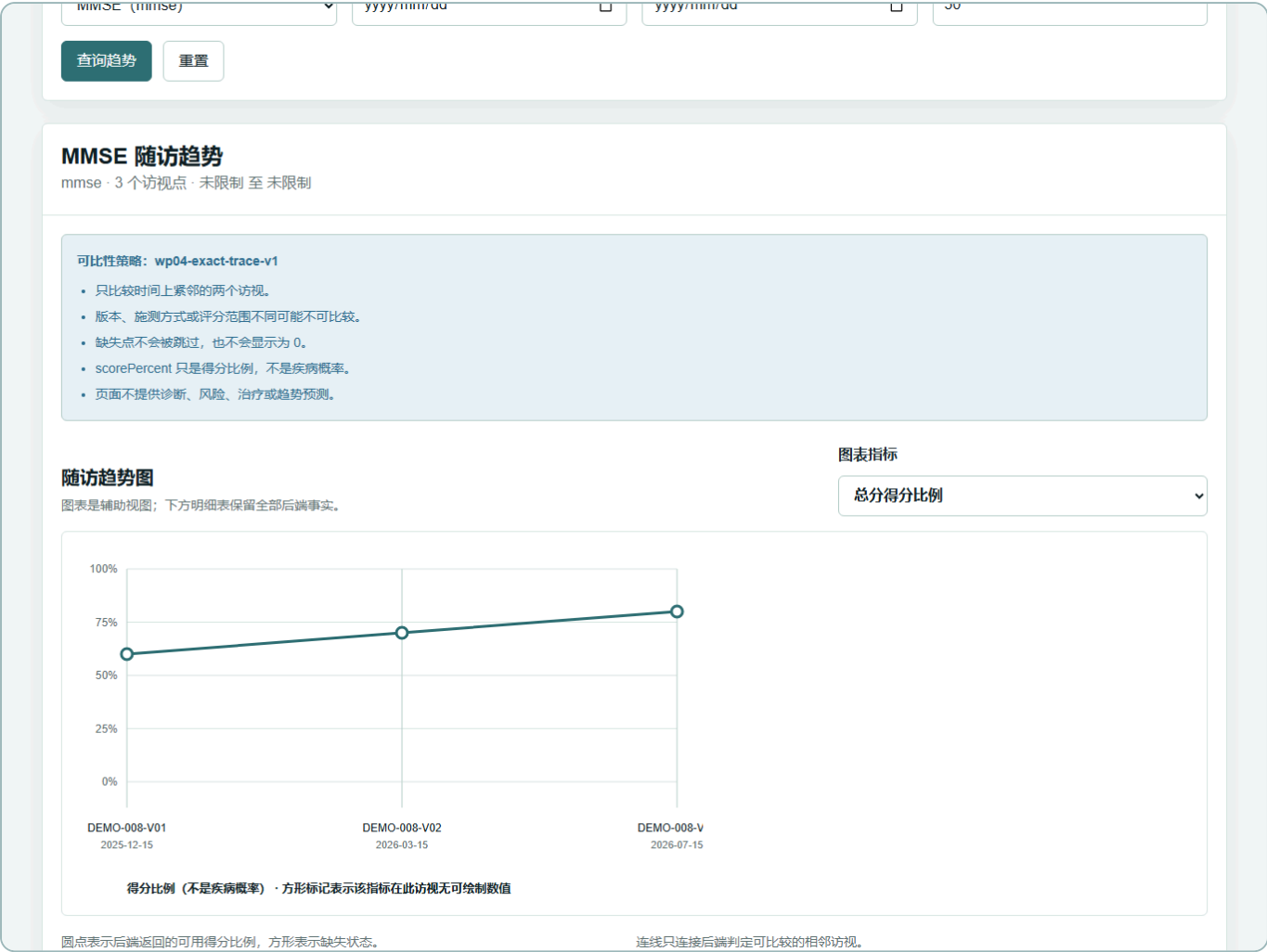


图 12 | DEMO-008 随访趋势。趋势图显示三个访视点；得分比例不是疾病概率，也不提供趋势预测。

场景索引

DEMO-001 至 DEMO-008 标准用途

场景	标准终态	推荐演示内容
DEMO-001	只有患者档案，无访视	查看仅有档案的患者，并说明如何创建访视
DEMO-002	1 条草稿访视，无量表实例	查看未初始化量表的访视，并说明如何初始化 MMSE / MoCA
DEMO-003	MMSE 进行中，部分作答	体验 MMSE 部分作答、自动保存和计时
DEMO-004	MoCA 进行中，部分作答	体验 MoCA 部分作答、自动保存和计时
DEMO-005	MMSE 已提交，评分待复核	查看评分待复核流程
DEMO-006	MoCA 已完成，认知域已计算，报告为草稿	查看认知域结果和临床报告草稿
DEMO-007	MMSE 与评分已锁定，报告已归档	查看已锁定、来源冻结并归档的最终报告
DEMO-008	3 次已完成访视、3 份报告、3 个趋势点	查看多次访视、历史报告和随访趋势

如实说明

当前演示边界

以下能力在当前演示版本中尚未实现，不应包装为已经完成。

当前没有公开用户管理界面

演示账号由演示数据预置，客户无法在当前产品界面中维护用户。

当前没有科研导出

工作台会将科研导出标注为规划中，当前没有可交付的导出流程。

当前没有 AI 辅助解释

规则化报告草稿没有使用 AI；当前不提供 AI 临床解释。

当前没有正式报告 PDF、打印和下载产品功能

本手册 PDF 是操作指南文件，不代表系统已经支持正式临床报告 PDF。

当前首页是轻量入口，不是完整临床工作台

当前首页与工作台只用于导航和能力概览。

未展示原始刺激图片

当前题目界面不展示 MMSE / MoCA 原始刺激图片，本次演示可跳过相关视觉材料。

证据能力与刺激材料必须区分：

当前已有的拍照上传和平板手写用于记录题目证据，不等于在题目界面展示原始刺激图片。

演示收口

演示数据恢复方法

客户自由操作后，由演示人员在仓库的 `backend` 目录执行现有脚本：

```
$env:NODE_ENV='development'
$env:DEMO_SEED_CONFIRM='YES'
$env:DEMO_ACCOUNT_PASSWORD='demo123'
npm run seed:demo
```

- 1 确认当前环境用途为 `development`。
- 2 执行上述命令，不传额外参数。
- 3 确认输出中的实际数据库名为 `cogmemory_ad_dev`。
- 4 确认终态为 8 个账号、8 个患者、9 个访视、8 个量表实例、98 个作答、6 个评分、5 个认知域结果、5 个报告、3 个趋势点，且演示账号登录会话为 0。

数据库门禁：

只允许在本地 `development` 演示环境恢复 `DEMO namespace`。实际数据库名不一致时必须立即停止，不得猜测或改连其他数据库。

现场结束检查

- ✓ 确认客户没有使用真实患者信息录入演示环境。
- ✓ 确认不可逆操作的演示数据已通过 `seed` 恢复。
- ✓ 确认演示账号登录会话已恢复为 0。
- ✓ 确认已退出页面，并停止本次演示启动的前端、后端和浏览器进程。

手册结束 | 智忆评客户演示操作手册 1.0 | 2026-08-04